

DANFLOW™ 1100

Et moderne og trådløst urinflowmålersystem



DanFlow™ 1100 er et moderne og meget brukervennlig system. Alle data fra vekttransduseren overføres med et unikt, trådløst kommunikasjonsprotokoll direkte til hovedenheten med en innebygget termoskriver. En komplett flowrapport skives ut direkte og både flow og volum vises i en og samme kurve.

Vekttransduseren i DanFlow™ 1100 systemet har et litiumbatteri som ikke må lades og med varighet på cirka to år ved normal bruk. Den kan brukes med et hev- og senkbart stativ, men også stå direkte på gulv under en toalettstol og trakt. Til toalettstolen kan festes en sparkbeskyttelse for å minimere risikoen for artefakter.

Hovedenheten i DanFlow™ 1100 er utrustet med et SD-minnekort der alle data spares automatisk. Målinger kan på så sett enkelt overføres til din datamaskin og konverteres til PDF format som du selv velger å lagre eller skrive ut. Rapporten kan importeres i de fleste moderne journalsystem.

DanFlow™ 1100 har følgende fordeler:

- Enkel og intuitiv hovedenhet som kan plasseres på bord, hylle eller direkte på vegg
- Batteridrevet, trådløst flowapparat med lang driftstid
- Rekkevidde på opptil 50 meter mellom vekttransduser og hovedenhet
- Rapporten viser urinflow og volum i en og samme kurve
- Enkel elektronisk overføring av rapporter til PDF format for lagring eller utskrift

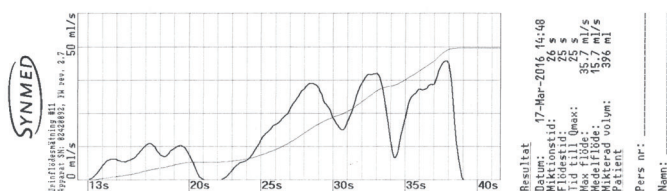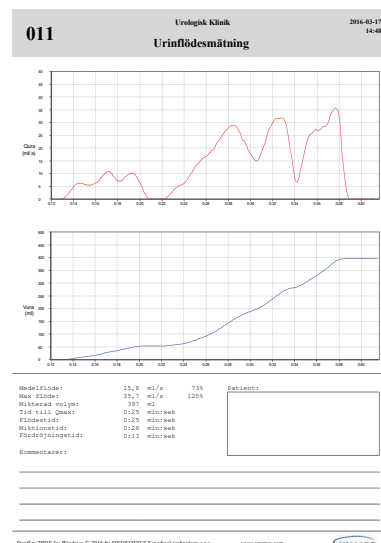

SynMed Medicinteknik AB
 Munkedamsveien 59B
 0270 Oslo

Tel: +47 45391000
www.synmed.se/no
info@synmed.se

Produsert av:
 Medkonsult M T s.r.o.
www.mmtsystems.com
info@mmtsystems.com

