

SIGMASTIM ΣIGMA™

En helt ny generation ECT-apparater från SigmaStim



SigmaStim Sigma™ är den femte generationens ECT-apparat från StimaStim. Den fortsätter att vara de mest avancerade ECT-apparaterna tekniskt sett på marknaden samtidigt som de utrustats med fler säkerhetsfunktioner och har förbättrad klinisk effekt.

SigmaStim Sigma™ har två grundlägen som den fungerar i. Med läget *One Knob Mode* kan systemet justeras med enbart en knapp med automatisk optimering av stimulusintensitet. Det andra läget *Four Knob Mode* tillåter dig att manuellt ändra inställningar med fyra reglage: pulsbredd, frekvens, duration och strömstyrka. Det är nu enklare att ändra i menyerna så du kan välja just det stimuleringsprogram som passar din patient, t ex Ultrabrief 0,3 ms.

Varje SigmaStim Sigma™ apparat kan anpassas efter just dina behov genom att du väljer tillbehör som passar din verksamhet. Det finns t ex handhållna stimuleringselektroder med stimuleringsknapp, fyra extra inspelningskanaler för EEG, 1 EMG, 1 EKG och 1 OMS (optisk rörelsesensor). Som tillbehör finns programmet Sigma EMR® för att visa på skärm och spara behandlingsdata i en SQL-databas för att sedan skapa rapporter i PDF-format som kan integreras i ert patientjournalssystem.

SigmaStim Sigma™ erbjuder följande fördelar:

- En ny 7" pekskärm kan visa upp till totalt 7 kanaler: 6 EEG, 1 EKG, 1 EMG och 1 OMS
- Kontinuerlig impedansövervakning under behandlingen
- Snabbare uppstartstid för interna tester
- Option med specialanpassad vagn, dator och EMR inspelningsprogram vilket gör behandling-
en tydligare och mer lättöverskådlig

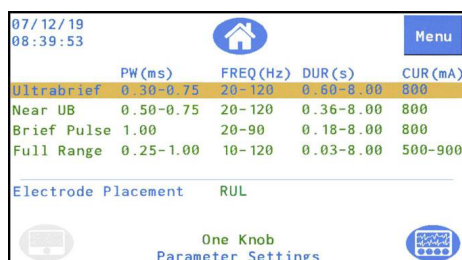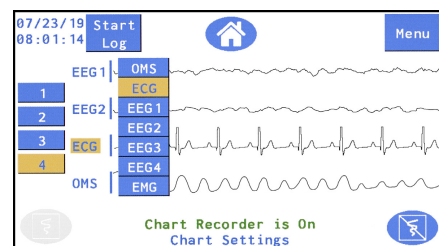

SynMed Medicinteknik AB
Magnus Ladulåsgatan 65
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
SigmaStim Domestic LLC
www.sigmastim.com
SigmaSales@sigmastim.com

